



Münsteraner Kyphosen-Orthese

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Die Münsteraner Kyphosen-Orthese (Reklinationsorthese) dient zur Aufrichtung der verstärkten Brustkyphose (Rundrücken). Sie übt an Korrekturpunkten Druck aus, dem in die gegenüberliegenden Freiräume ausgewichen werden muss. Zusammen mit physiotherapeutischen Übungen soll mit dem Korsett die verstärkte Brustkyphose aufrichtet und die gesamte Rumpfhaltung verbessert werden.


Der Tragekomfort und die Tragedauer der Münsteraner Kyphosen-Orthese hängen ganz wesentlich von Form und Stärke der Kyphose, aber auch vor allem von der Mitarbeit des Patienten ab. Die Orthese ist im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes entstanden. Ziehen Sie deshalb im Bedarfsfall auch den Rat Ihres Arztes, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Ergotherapeuten etc. mit hinzu.

Die Münsteraner Kyphosen-Orthese besteht aus einer zirkulären Kunststoffschale, die vorne durch Klettverschlüsse oder Gurtband mit Kunststoffschnallen verschlossen wird. Die recht starke Bauchpresse in Kombination mit dem rückwärtigen Freiraum führt zu einer Stellungsänderung der Lendenwirbelsäule und dadurch zu einer Aufrichtung der Brustkyphose. Diese Aufrichtung wird noch verstärkt durch die vorne oberhalb der Brust liegenden Reklinationspelotten. Sie korrigieren die Brustwirbelsäule zusammen mit dem hinteren oberen Gegenhalt zwischen den Schulterblättern und der Bauchpresse. Um den Reklinationspelotten auszuweichen, ist nach hinten ausreichend Platz.

Durch die Münsteraner Kyphosen-Orthese wird der Anwender/die Anwenderin der Diagnose entsprechend korrigiert. Es ist wichtig, sich in diese Position bringen zu lassen und den Druckpelotten in die gegenüberliegenden Freiräume auszuweichen.

Die Münsteraner Kyphosen-Orthese umfasst den Rumpf zirkulär, kippt Becken und Lendenwirbelsäule in die Entlordosierung und richtet durch korrigierende Reklinationspelotten bzw. Sternalpelotten die übermäßige Brustkyphose über den hinteren oberen Korsetttrand hinweg auf.

Zudem entlastet sie dadurch die vorderen Wirbelsäulenbereiche in der Brustwirbelsäule. Dem Druck der Bauchpresse kann nach hinten in den Freiraum ausgewichen werden. Die Münsteraner Kyphosen-Orthese ist Teil eines Therapiekonzeptes und kann nur im Rahmen der vollen Mitarbeit des Anwenders/der Anwenderin optimale Wirkung haben. Die Einhaltung der täglichen Tragezeit, die physiotherapeutischen Übungen unter Aufsicht und das tägliche therapeutische Turnen zu Hause sind Bausteine der Therapie, die zum Erfolg beitragen.

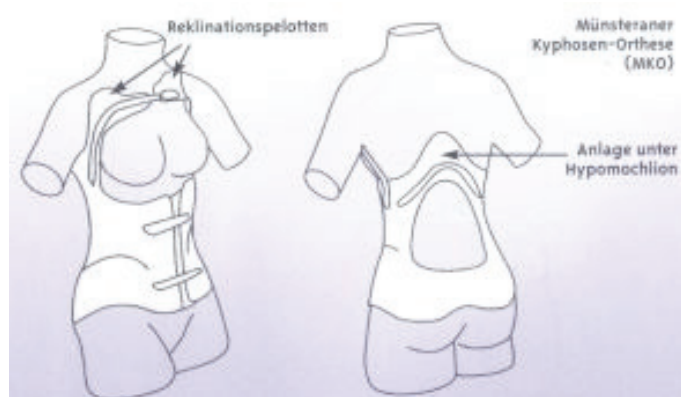

Für eine persönliche Beratung in
unserem Hause ist für Sie da:

Orthopädietechnik

Telefon: 021 62 / 37 39 70

E-Mail: info@lettermann.de

Adresse: Helmholtzstraße 27
41747 Viersen